



HEMOCARE

Homecare Katalog

Ventilasyon

Özel Teknolojisi ile Güvenilir Ventilasyon

Solunum sistemi, hastalık dolayısıyla ya da kaza sonucu hasar aldığında akciğerler yaşamın sürdürülebilmesi için yetersiz kalabilir. Uygun ventilasyonu sağlayabilmek için güvenilir teknolojiler geliştirmekteyiz. Güvenli ve efektif tedavi bizim önceliğimizdir. Bunun sonucunda, cihazlarımız hastanın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde otomatik ventilasyon sağlar ve hastaya maksimum destek verir.



**YENİ!
HFO**



prisma VENT50-C

Her Zaman En İyi Çözüm

Prisma VENT50-C ventilatör prisma VENT50'de bulunan diğer tüm özelliklere ek olarak High-Flow (HFT) modu ile donatılmıştır.

HFT modunda cihaz dakikada 5 ila 60 litre sabit bir akış sağlar. Dahili oksijen girişi olup, prisma VENT AQUA ile ısıtılan ve nemlendirilen hava akışı bir nazal kanül vasıtasıyla hastaya ulaşır. Non-invaziv ve Invaziv uygulamalarda farklı hasta arayüzü kullanılır.

Prisma VENT50-C tekli hasta devresi ile kullanılabildiği gibi High-Flow Terapisi için nazal kanül ile diğer hasta devreleriyle birlikte de kullanılabilir.



prisma VENT50

En Üst Düzeyde Solunum Terapisi

İnvaziv ve non-invaziv en üst düzeyde solunum terapisi için çözüm ortağınız, geniş ventilasyon modları ile kesin çözüm sunar. Hastalara özel geliştirilmiş parametreler ile tam uyumlu çalışır.

Basınç ve Volüm hedefli 50cmH₂O basınca kadar çıkabilir. Dahili 12saat batarya ile uzun süreli transport çalışma imkanı, entegre oksijen port girişi, büyük parlak ekran ile keskin görüntüler, SPO₂ ölçüm imkanı, sessizlik, dahili nemlendirici ile kullanım, polisomnografi sistemlerine bağlanma, uzaktan bağlantı ile hasta takibi gibi birçok ayrıcalıklı özellikler sunar.



VENTIlogic LS / plus

IV ve NIV Ventilasyonda Güvenilir Yaşam Destek Ünitesi

İnvaziv ve non-invaziv mekanik ventilasyon gerektiğinde, basınç ve hacim kontrolü yaparak, hastaya optimum solunum imkanı ve tedavi şansı sunan bu sistem, dahili bataryalı bir yaşam destek ünitesi olarak kullanılır.

LIAM seçeneği ile hastanın alt solunum yollarında birikmiş sekresyonun yukarıya taşınmasını ve öksürük desteği sağlar. Hem pediatrik, hem de yetişkin hastalar için uygundur.

Non-invaziv modlar: CPAP, S, ST, T ve TA

İnvaziv modlar: PCV, PACV, PSV, VCV, VACV ve SIMV

Tidal Hacim Aralığı: 50 ml - 3000 ml

Ventilasyon



prisma VENT30 / VENT40

Kolay, Sade ve Rahat

Basit çalışma ve efsanevi uyum, parlak görüntüler, sezgisel menüler ve artan güvenlik

12 saat dahili akıllı batarya ve adaptörsüz kullanım ile prismaVENT gerek klinik gerekse evde bakım solunum tedavi çözümleri için birinci tercihtir. Yenilikçi solunum teknolojisi ile şimdiye dek geliştirilen en sessiz ventilatördür.



prisma 30ST / AVAPS

Klinik, Uyku Laboratuvarı ve Evde Bakımda Güvenilir Çözüm Ortağınız, Ayarlanabilir Hedef Hacimli BiLevel-ST Terapi Cihazı

Ayarlanabilir hedef hacmi, autoEPAP ve destek sıklığıyla benzersiz autoS/T modu ile prisma30ST solunum yetmezliği ve Uykuda Solunum Bozukluğu olan hastalarda hızlı ve uzun süreli bir tedavi başarısı elde edecek şekilde rahat ventilasyon sunar. Çeşitli ventilasyon modları ve 4 ile 30 hPa arasında geniş basınç aralığı, gerektiği şekilde doğal veya senkronize solunum oluşturmak üzere kişiselleştirilmiş tedavi ayarlarını mümkün kılar.

Çeşitli ventilasyon modları: CPAP, APAP, S, T, S/T, autoS/T, aPCV Geniş basınç aralığı (4 – 30 hPa)
Hedef hacim her pozisyonda sağlanır
SCOPES (KOA ve hipoventilasyon için) kullanıcı için ayarları basitleştiren, endikasyona özel ön ayarlar
Yüksek basınçlarda bile son derece sessiz



Allegra M30

Kolay ve güvenli kullanımı ile evde bakım hastalarına ideal çözüm sunar.

Ekonomik - zeki geri dönüşüm kavramı

Kullanımı daha kolay- mobil ve akülü

Sofistike konsept - sağlam, uzun ömürlü ve darbeye dayanıklı yeni aspiratörümüz.

Uyku Tedavisi

Uyku Tedavisinde Akılcı Çözümler

Pek çok uzmanlık alanından doktorlar, artan bir hızla uykuda solunum bozukluğunu teşhis etmektedirler. Uykuda Solunum Bozukluğunun sonucu olarak gün içinde sürekli uykululuk hali, iş hayatında düşen verimlilik ve yüksek tansiyon sorunları ortaya çıkmaktadır. Kalp yetmezliği olan hastalar, diğer uykuda solunum bozukluğu olan hastalara göre daha ciddi risk altındadırlar.

Uzun yıllardır uyku tıbbı için teknoloji geliştirmekteyiz. Cihazın güvenilirliği, tedavi başarısı ve kullanım kolaylığına odaklanmaktayız. Sonuç olarak; hastayı efektif olarak tedavi eden ürünler, cihaz-hasta uyumu ve sadece hastaya konsantre olmanızı sağlayarak işinizi basitleştiriyoruz.





reddot award 2015
winner



prisma20A

Değişken Basınç Gereksinimleri, Obstrüktif Uyku Apne (OSA) Tedavi Cihazı

Terapi basıncı otomatik olarak hastanın basınç gereksinimine uyar.
Forced Oscillation Technology (FOT) yardımıyla, obstrüktif ve santral apne arasında güvenilir bir şekilde ayırım yapar Prisma20A, CPAP ve APAP modları ve rahat basınç tahliye softPAP özelliği sayesinde yüksek derecede terapi esnekliği ve rahatlığı sağlar.
softPAP ile rahat ve konforlu nefes verme imkanı.



prisma SMART

Değişken Basınç Gereksinimleri, Obstrüktif Uyku Apne (OSA) Tedavi Cihazı

Yeni prisma SMART, Löwenstein Medical'in yüksek kalitede otomatik CPAP cihazları geleneğini sürdürür ve kişiselleştirilmiş solunum tedavisi için klasik veya dinamik basınç düzenleme şeklinde yeni bir seçenek sunar.

SoftPAP ile rahat ve konforlu nefes verme özelliği
Geniş LCD ekranı, basit kullanıcı navigasyonu ile kullanım kolaylığı

Geliştirilmiş algoritma ve hafıza teknolojisi
Cihaz iyi bilinen nemlendirici prismaAQUA ile kombine edilebilir



SOMNObalance e

Değişken Basınç Gereksinimleri, Obstrüktif Uyku Apne (OSA) Tedavi Cihazı

Konforlu ve otomatik algılama ile değişen AUTO-CPAP tedavisi için üretilmiştir
Merkezi solunum olaylarını obstrüktif olanlardan ayırt eden OPP teknolojisi
Çok sessiz çalışma prensibine ek olarak isteğe bağlı olarak nemlendirici (SOMNOaqua) entegre edebilme
SoftPAP basınç düşürücü özelliği ile rahat nefes verme imkanı sağlar.



reddot award 2015
winner



prisma20C

Sabit basınç gereksinimleri Obstrüktif Uyku Apne (OSA) Tedavi Cihazı

En son teknolojiyle donatılmış modern ve işlevsel bir tasarım Dokunmatik ekran ile kullanım kolaylığı Cihaz yüksek basınçlarda bile sessiz çalışma ve hassas basınç düzenlemeyi mümkün kılan mükemmel bir üfleyici teknolojisi Türkçe menü ve SoftPAP basınç düşürücü özelliği ile rahat nefes verme imkanı Mükemmel raporlama Nemlendirici prismaAQUA ve ısıtıcı hasta devresi kullanılabilir



prisma SOFT

Sabit basınç gereksinimleri Obstrüktif Uyku Apne (OSA) Tedavi Cihazı

prisma SOFT CPAP cihazı, sürekli pozitif basınçta Uykuda Solunum Bozukluğu tedavisi için modern bir tedavi cihazının gereksinim duyduğu tüm özellikleri sunar.

Kullanımı ve okunması kolay geniş LCD ekran, basit kullanıcı navigasyonu ve düşük ses seviyesine ek olarak cihaz tedaviyi hasta için daha konforlu hale getiren basınç düşürücü softPAP özelliğine sahiptir.

prisma SOFT nemlendirici (prismaAQUA) ile kullanılabilir.



SOMNOsoft 2e

Sabit basınç gereksinimleri Obstrüktif Uyku Apne (OSA) Tedavi Cihazı

Temel CPAP tedavisi için üretilen cihaz fısıltı kadar sessiz ve kullanımı kolaydır. Terapi verileri cihazda ve bir SD kartında terapi kontrolü için kaydedilir.

SOMNOsoft, basınç dengesi ve akıllı basınç desteği softPAP'ı sunarak rahat nefes verme imkanı sağlar OPP teknolojisi, obstrüktif ve merkezi solunum olaylarını güvenilir bir şekilde ayırır.

Rampa özelliği ile hastaların uykuya dalmasını kolaylaştırır

Uyku Tedavisi



reddot award 2015



prisma25S

Yüksek veya Dalgalı Basınç İhtiyacı İçin BiLevel-S Terapi Cihazı

Geniş basınç aralığında uyarlanabilir basınç düzenlemesi, Donanımlı FOT (Zorlanmış Salınım Teknolojisi) ile apne farklılığı ve apne sürecini destekleyen özellikler. Geniş basınç aralığı (4 - 25 hPa) ve Terapi ayarları ile daha fazla esneklik için parametreler. Yüksek basınçta bile son derece sessiz. Entegre ısıtılabilir hortum ile hasta devresi ve maskedeki yoğunlaşmayı önler. TRI-LEVEL ile kusursuz solutma yapar. Standart OTO-BPAP özelliği ile daha konforlu kullanım sağlar.



reddot award 2015
winner



prisma25ST

Obstrüktif, Karışık - Komple Uyku Apne tedavisi için BiLevel-ST Terapi Cihazı

Parametre ayarları ve göstergelerle müşteri odaklı çözümler sunan özel ve maksimum esneklik. SCOPES (kendine özgü ön ayarlar KOAH, HIPOVENTİLASYON vb.) kalıpları oluşturarak hızlı terapiye olanak sağlar. Güvenilir (FOT) teknolojisi ile Obstrüktif ve Santral Apne tespiti. İsteğe bağlı otomatik veya manuel solunum sayısı ile ayarlanabilen ek güvenlik. Yüksek basınçta bile son derece sessiz. Entegre ısıtılabilir hortum ile hasta devresi ve maskedeki yoğunlaşmayı önler. TRI-LEVEL ile kusursuz solutma yapar. Standart AUTO-BPAP özelliği ile daha konforlu kullanım sağlar.



reddot award 2015
winner



prisma30ST

Solunum yetmezliği, örn., Pozisyona bağlı hipoventilasyon ve / veya KOAH ve eş zamanlı USB (Uykuda Solunum Bozukluğu) tedavilerinde etkin çözüm. Prisma30ST sessiz, otomatik EPAP ve otomatik solunum yedeklemesi ile ekstra konfor sağlar. Otomatik yedekleme frekansı veya sabit yedekleme frekans ayarı ile isteğe bağlı alarmlar belirleyip (Kaçak, düşük dakika hacmi, düşük tidal hacim, apne vb.) güvenliği en üst düzeye çıkarın. SCOPES (Kendine özgü ön ayarlar KOAH, HIPOVENTİLASYON vb.) kalıpları oluşturun hızlı terapiye olanak sağlar. Dokunmatik ekran ve kullanımı kolaylaştıran akıllı kullanıcı menüsü, terapiyi hızlı ve etkili bir şekilde uygulamanızı sağlar.

Uyku Tedavisi




reddot award 2015
winner



prismaCR

Kompleks Uyku Apne Sendromu için Çözüm ve Tedavi Cihazı

Periyodik solumalı veya Cheyne-Stokes solumalı (örneğin kalp yetmezliğinde) ve merkezi, karışık veya karmaşık uyku apneli hastaların tedavisi için terapi cihazı. Terapi cihazı ventilasyonu otomatik ve sürekli olarak hastanın değişen gereksinimlerine adapte eder. Cheyne-Stokes gibi periyodik solunum yapan hastalarınız için prismaCR santral, karışık veya kompleks uyku solunum düzenini bozan rahatsızlıklar için çözümler sunar. Hastanın mevcut solunum esnasında prismaCR'de solunum düzenleme, minimum solunum sayısı ile birlikte hedef solunum hacmine dayalı olarak ihtiyaç odaklı basınç desteği sağlamaktadır.

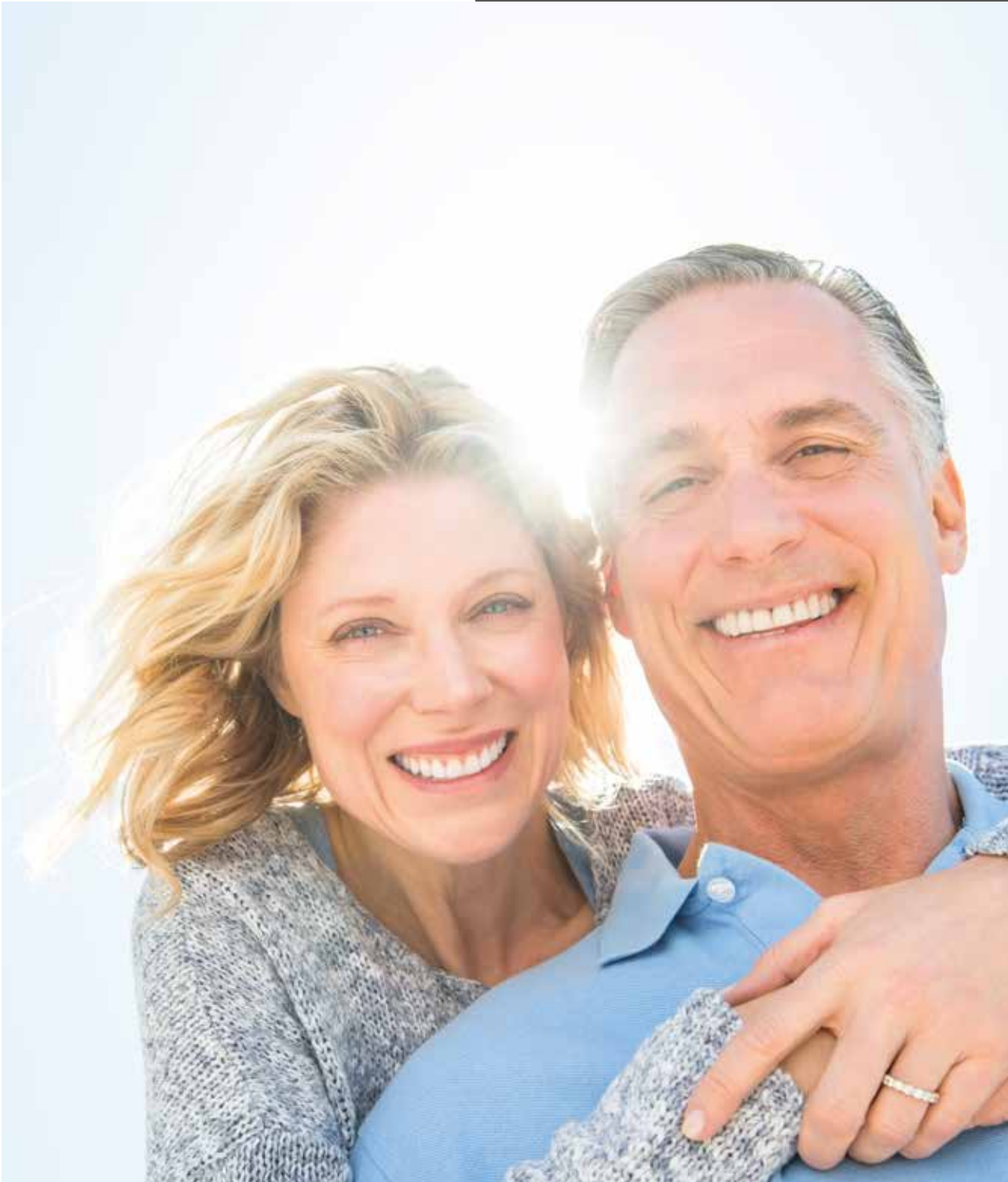

Uyku Tedavisi

Oksijen Tedavi

Vücuda gerekli oksijeni göğüs boşluğunun iki yanında bulunan akciğerler sağlar. Süngerimsi yapısı ile akciğerler ortamdan solunan havayı süzüp temizleyerek tüm doku ve kana sağlıklı oksijen iletir. Akciğerler meydana gelen bir hastalık durumunda görevini yerine getiremediğinden vücut oksijensiz kalır. Bu durumda hastaya dışarıdan oksijen desteği verilmesi gerekir. Tütün ürünlerinin kullanımı ve artan çevresel kirlilik faktörleri ile birlikte kronik solunum yetmezliği olan hasta sayıları da artmıştır. Uzun süreli oksijen tedavisi (USOT) ve mekanik ventilasyon uygulamaları bu hastalar için iki majör tedavi yöntemidir. USOT'da en sık kullanılan oksijen temin sistemi oksijen konsantratörleridir.

Oksijen konsantratörleri ortam havasındaki gazları ayrıştırır ve %95 (± 3) saflıkta oksijen üretir. Hastane ortamında oksijen desteği olarak oksijen tüpü takılır. Ancak sürekli oksijen takviyesi gereken hastalarda oksijen tüpünün ev ortamında kullanımı zor ve pahalı olacağından oksijen konsantratörü daha uygun olmaktadır. Hastaların yaşam kalitelerini artırmak ve sağlık harcamalarını azaltmak için evde bakım hizmetleri geliştirilmiştir. Oksijen konsantratörleri, evde veya hastanede, birçok solunum hastalığının tedavi sürecinde kullanılır.



FreeStyle® COMFORT™

Portatif Oksijen Konsantratörü Sizi Hayata Katar

Airsep'in 25 yıllık portatif oksijen konsantratöründeki deneyimi ve Caire'nin likid gaz sistemlerindeki tecrübesi FreeStyle Comfort da birleşti. Özel tasarlanan taşınabilir oksijen konsantratörü FreeStyle Comfor her yerde, her nefeste yüksek oksijen hacmi, kolay taşınabilir, hafif ve ergonomik özellikleriyle sosyal hayata karışmanın rahatlığını size sunar. FAA onaylı ve kullanıcı tarafından kolaylıkla değiştirilebilen uzun ömürlü bataryası ile FreeStyle Comfort bir portatif oksijen konsantratörünüzdeki tüm beklentilerinizi fazlası ile karşılar.



VisionAir 5

Bugün piyasadaki en sessiz ve en hafif oksijen konsantratör cihazdır. Ev içi oksijen tedavisi için ekonomik ve düşük enerji tasarrufu ile Airsep **VisionAir 5** sadece 30 lbs (13,6 kg) ağırlığındadır. **VisionAir 5** Oksijen hastaları sessiz, hafif ve enerji tasarruflu özellikleri sayesinde uzun süreli oksijen tedavilerini daha iyi geçirmektedir. Bunların dışında Airsep **VisionAir 5** güvenli bir oksijen üretimi sağlar ve içerdiği alarm sistemleri sayesinde yeterli oksijen oluşumunu engelleyen bir durum varsa hastayı ve yakınlarını sesli olarak uyarır. **VisionAir 5** cihazlarında güvenlik ön planda tutulmuştur. Resetlenebilir elektrik güvenlik sistemi, komplike alarm sistemi ve ayrı ayrı kullanım ve çalışma saati ile ek oksijen ihtiyacınızı güvenle sağlar.

Maskeler

Yüzünüzdeki Konforun Anahtarı

Hastaların maskeden beklentileri sürekli artmaktadır. Yüze tam olarak oturmasının dışında, yüksek terapi basınçlarını tolere etmeli, hava akımının gürültüsünü kesmeli, hastanın nefes vermesini kolaylaştırmalı, takıp çıkartması kolay olmalı ve yüzü tahriş etmemelidir. İleri teknoloji ile Almanya’da ürettiğimiz maskeler bu özelliklerin hepsini taşımaktadır. Tüm yüz tiplerine uyması sayesinde hasta uyumu maksimum düzeyde yakalanmış olur. Maske çeşitliliğimiz sayesinde her hasta grubu ve her yüz tipine göre Joyce ailesinde bir maske bulmak artık çok kolay.



CARA

Yüzünüzdeki Konforun Yeni Adı

Yeni CARA Full Face ile CARA nazal maskenin konforunu fullface maske kullananlara sunuyor ve CARA ailesi tamamlanıyor.

Mükemmel uyum, yüksek konfor, rahat ve sessiz bir ekshalasyon ve iyi cilt uyumluluğu yaşayın. Hafifliğinden, yumuşak, esnek ve yüzünüze tam iyi bir cilt uyumu sağlayan maske yastığından, kolay ayar olanağından ve birçok akıllı detaydan faydalanma imkanına ulaşın.



JOYCEone

Tek Ölçü, Tek Maske

Güvenilir, sessiz, tam anlamıyla mükemmel uyum sağlayan tek ölçüsü ile uluslararası piyasalardaki en çok satan maskemiz. Özel olarak tasarlanmış maske yastığı ve son derece esnek alın desteği ile iyi uyum sağlar. Kanıtlanmış döner başlık seti hasta devresinin yerinde kalmasını sağlar.



JOYCEone Full Face

Tek Ölçü, Tek Maske

Löwenstein Medical'in geliştirdiği Full face maske, başarılı JOYCEone serisinin tüm avantaj ve konforuna sahiptir. Sağlam malzemelerden yapılmış, hafif ve kompakt ve son derece rahat, ayrıca kullanım ve temizlenme kolaylığını hastalarımıza sunar.

Maskeler



JOYCEeasy

Kullanımdaki Kolaylığı Fark Edin

JOYCE easy, üç boyutta mevcut olup, sessizliği ve uyumluluğu ile hayranlık uyandırmıştır. Maske yastığındaki ayrıntılardaki pek çok yenilik, JOYCEeasy'yi daha da rahat yapmıştır. Maske, nefes verme havasının sessiz akışı, top ve soket bağlantısıyla sağlanan hareket özgürlüğü ve basit temizleme prosedürleri gibi bilinen ekstralarını korur.



JOYCEeasy Full Face

Sürekli ürün geliştirmenin sonucu olan Löwenstein Medical'in başarılı fullface maskesi, sürtünme azaltılmış silikon parçaları, daha fazla hareket serbestliği için eşsiz döner başlık bağlantısı ve entegre basınç ölçüm portu dahil olmak üzere çok iyi tasarlanmış detaylara sahiptir. Rahat sunan maske S, M ve L boyutlarına sahiptir.

Maskeler



JOYCEeasy next FF

Löwenstein Medical'in başarılı JOYCEeasy Full face maskesinin modifiye edilmiş versiyonu, her ikisi de yüksek basınçlı kullanım için tasarlanmış, optimize edilmiş bir maske yastığı ve yeni başlık ile donatılmıştır. Kolay açılıp kapanan ergonomik başlık klipsleri, maske kullanımını basitleştirir. Normal ve obez yüzleri olan uyku apnesi hastaları için özellikle uygundur. NV varyant olarak da mevcuttur.



JOYCE SilkGel

Löwenstein Medical'in bu terapi maskesindeki yüksek kaliteli jel ve SilkTec yüzey kaplaması kombinasyonu cilt dostu bir konfor ve yüz hatlarına mükemmel uyum sağlar. Maskenin temizlenmesi çok kolaydır. Üç boy (S-M-L) ve isteğe bağlı ekshalasyon sistemi olmadan non-vented varyant olarak da mevcuttur.



JOYCE SilkGel Full Face

Yüksek seviyedeki rahatlığı ile JOYCE SilkGel, diğer Full face maskelerini geride bırakıyor. Jel dolgulu maske yastığı ve alın yastığı, ipeksi pürüzsüz Löwenstein Medical SilkTec ile kaplıdır.



NP 15

Sessiz, Daha Sessiz, ve en Sessiz

Adından da anlaşılacağı gibi, sessizlik uzaktaki yaprakların kıpırdaması gibi sadece (15db) İki adet döner başlık seti ve boru sabitleme kayışları, sabitlikten ödün vermeden sınırsız hareket özgürlüğü sağlar. NP15, iyileşme ve uyku için en iyi konforu sunar.

* 10 hPa (hektopascal) basınçta 15 dB (A) (desibel)



JOYCEclinic FF

Her Durum İçin Doğru Çözüm

Ağız-Burun maskesi JOYCEclinic, hastanelerde / kliniklerde noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyon tedavisi için hasta konforunu sağladığınız maskemiz, 50 hPa'ya kadar olan basınçlarda bile, hızlı ve basit uygulama, güvenli ve konforlu bir uyum sağlar.

JOYCEclinic FF; havasız, AAV ile havalandırılmayan (Sızıntı 1) ve AAV ile havalandırılmış (Sızıntı 2) varyantlarda üç boyutta mevcuttur. Pratik bir aksesuar olarak sunulan endoskopi adaptörü, havalandırma işlemini kesmek zorunda kalmadan bronkoskopi yapılmasına izin verir.



Silentflow 2

Soluk verme sistemi

Maskesinin gövdesine takılan soluk verme sistemleri sık sık hastayı rahatsız eden yüksek soluk verme seslerine neden olurlar. Ancak soluk verme sistemi (Silentflow 2) iyi düşünülmüş tasarımı ile mümkün olan en yüksek uyku rahatlığı sağlar: Hava yankı biçimli delikten hortum yönüne sessizce geçer. Bu yolla rahatsız eden hava akımı da önlenir. Silentflow 2, JOYCE ailesinin bütün nazal NV (non-vented) modelleri (JOYCE NV, JOYCE NV 40 hPa, JOYCE GEL NV) ile birlikte kullanılır.

Endoskopik Adaptör

Profesyonel Bir Çözüm

NIV yöntemi ile endoskopik uygulama imkanı



Uyku Teşhis Sistemleri

Doğru Teşhis, Doğru Tedavi

Uyku bozuklukları günlük yaşantımızda olumsuz etkiler yaratmaktadır. Uyku bozukluklarının dikkat dağınıklığı, unutkanlık, aşırı uykululuğun neden olduğu trafik kazaları, cinsel isteksizlik, obezite, yüksek tansiyon, felç, kalp rahatsızlıkları gibi birçok sonucu vardır. Dolayısıyla, Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS), Huzursuz Bacaklar Sendromu ve diğer pek çok solunum ve nörolojik rahatsızlığın yarattığı uyku bozukluklarının tedavisi büyük önem taşımaktadır.

Uyku bozukluğu teşhisinin konulabilmesi için Polisomnografi testinin uygun koşullardaki bir laboratuvarda yapılması gerekmektedir. Bu test, doğru teşhisin konulabilmesi ve doğru tedavinin uygulanabilmesi için son derece önemlidir.

Uyku laboratuvarınız için Polisomnografi cihazı tercih ederken sadece şu an kullanılan bir teknolojiyi değil, yıllar sonra bile kullanılabilecek, geliştirilebilecek bir platformu seçin. Uyku tıbbının gelişim seyrini takip eden değil, ona yön veren bir alt yapıyı isteyin. Compumedics bu özelliklerin tamamını karşılayan bir uyku teşhis platformunu sizlere sunmaktadır. The Mayo Clinic, University of California, The Cleveland Clinic, NASA, The University of Tokyo gibi dünyadaki en seçkin uyku merkezlerinde kurulu Polisomnografi sistemlerimizi bir sonraki sayfada inceleyebilirsiniz.





Yeni GRAEL SERİSİ

®grael	®grael ^{eeG}	®grael ^{psG}	®grael ^{LT}
 PSG/EEG	 EEG	 PSG	 EEG
- Pazarın en gelişmiş amplifikatörü - Compumedics'in amiral gemisi, - Yüksek tanımlı PSG, EEG ve araştırmalar için kullanılan en verimli amplifikatör. - Uyku ve Epilepsi Teşhis veya araştırma teşhisi.	- Daha da güçlü bir evrim - EEG çalışmaları için inşa edilen Grael EEG amplifikatörü - Rutin EEG, LTM, YB, klinik ve araştırma uygulamaları için uyarılmış potansiyeller sağlar.	- Uyku çalışmaları için ayrılmış amiral gemisi Grael amplifikatörüne dayanarak Grael PSG kanal alt kümesine sahiptir. - HD PSG amplifikatör kanallara sahip gerçek altın standart için belirtildiği AASM Tip 1 çalışmaları.	- Araştırma odaklı teknoloji ile endüstri lideri ve değer yükseltici. - Amaçlanan güçlü bir EEG amplifikatörü ve klinik EEG çalışmaları.



Compumedics Somte PSG

İster uyku laboratuvarında, ister serviste ya da hastanın evinde full PSG çekimine imkan tanır.

AASM 2007 kriterlerine uyumlu toplamda 25 kanallı uyku laboratuvar sistemi.

Senkronize video özelliği, manuel ya da otomatik analiz imkanı, Türkçe raporlama

Yatak başı ünitesine eklenebilen harici DC girişleri ile kayıtlara kapnograf, pHmetre gibi cihazlar ekleyebilme

6 x EEG, 2 x EOG, 2 x Çene EMG, EKG – Thorasik empedans seçeneği • Airflow, • Horlama • Basınç (CPAP/ Bilevel) • Thorasik RIP band • Abdominal RIP band • 2 x Bacak EMG • Pozisyon • Oximetre SpO2 • Nabız • Plethysmography dalga formu ve Oksimetre probu durumu bilgilerini sağlar • Harici giriş ile termistor, harici pozisyon sensörü, Aux AC veya Aux DC kullanılabilir.



MiniScreen Premium

Yeni 12Kanallı poligrafi sistemi MiniScreen Premium, XPAP kontrolünde doğru hava akımını ölçme özelliği ile doğru karar vermenizi sağlar. BiLevel ve ASV gibi ventilasyon modlarında, hızlı değişken ve yüksek basınç ölçümleri için mükemmel sensor hassasiyeti. Kolay hasta uygulaması, RERA'nın güvenilir analizi, düşük sarf maliyeti, dahili batarya, dahili hafıza, Türkçe yazılım, kolay raporlama ile üzerinizdeki iş yükünü alır.

MiniScreen PRO

Ayakta tedavi ölçümlerinden uyku laboratuvarı polisomnografisine kadar AASM kurallarına uyan MiniScreen PRO, size tam esneklik kullanımı ile rahat bir çalışma sağlar. Basınç, akış, sızıntı gibi ek sinyallerin beslenmesi, tidal hacmi ve CO2 parametreler ile sorunsuz solunum izlemine izin verir. Bu sayede titrasyon tedavisinde daha net kararlar vermenize olanak sağlar. Düşük kullanım maliyeti, MiniScreen PRO'yu güvenilir ve ekonomik kılar.



SOMNOcheck micro

Apne Tarama Cihazı

Kolay anlaşılabilir sonuçlar için renk kodlarının kullanılması Tek tuş ile kolay kullanım ve sonuçlara ulaşma Uykuda solunum bozukluğu riski taşıyan hastaların belirlenmesinde kolay ve hızlı yöntem Yapılan analizin geçerliliği: hassasiyet % 96,2, spesifiklik % 91,7 Yeni, PulseDalga Analizi (PulseWaveAnalysis, PWA) teknolojisi yüksek kalitede sonuçlara ulaşılmasını sağlar.



reddot award 2015
winner



prismaLAB

prismaLINE'in tüm modlarını kullanabileceğiniz tam anlamıyla titrasyon cihazı. prismaLAB yazılımı ile tüm mod ve basınç değişikliğine bilgisayardan rahatlıkla ve kolay ulaşılma kabiliyeti sunar. Sürekli terapi için uyumlu ve yumuşak basınç, gece boyunca tüm modlar arasında kolay geçişler sağlar. Tüm PSG sistemlerine bağlanma imkanı sunar.



prismaLABset-PSG

prismaLAB cihazı, prismaAQUA nemlendirici, prismaBAG çanta, prismaCONNECT, prismaTS software, USB data kablosu ve prismaPSG

prismaLINE



Uyku Teşhis Sistemleri

Löwenstein Medical TÜRKİYE

Löwenstein Medical TÜRKİYE Löwenstein Grup'un Türkiye'deki yan kuruluşudur ve Löwenstein Medical Technology ürünlerini temsil etmektedir. Löwenstein Medical TÜRKİYE, Alman kalitesinde maskeler dahil olmak üzere anestezi, yenidoğan ventilatörleri, ICU ventilatörleri, diagnostic ve solunum terapi cihazları olmak üzere Türkiye pazarı için çok geniş yelpazede ürün gamı sunmaktadır.

Löwenstein Medical Technology, Almanya'da tıbbi cihaz ve sistemlerin konusunda ürün geliştirme, üretim ve pazarlama konularında uzmanlaşmıştır. Şirket yaklaşık 30 yıllık tarihi boyunca, evde bakım alanında önemli katkılarda bulunmuş pazara yön veren lider firma konumundadır. Yenidoğan bakımında, yoğun bakım ventilatörlerinde ve anesteziye şirket dünya çapında marka bilinirliği olan yenilikçi

ürünlerini geliştirir ve üretir. Löwenstein Medical, yoğun AR & GE çalışmalarıyla, yeni ürünler üretmeyi her zaman başarıyla yerine getirmekte ve dolayısıyla tıbbi ilerlemeye önemli katkı sağlamaktadır. Löwenstein Medical, birinci sınıf bir iş gücüne, iyi kurulmuş bir satış altyapısına ve hastaya fayda sağlamayı amaçlayan bir şirket stratejisine dayanarak, yüksek kalitede modern tıbbi cihaz ve sistemleri üretmeye ve satmaya devam edecektir.

Heinen + Löwenstein, 8 Temmuz 2016'da Weinmann GmbH + Co. KG'yi satın alarak Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG olarak Grup bünyesine almıştır. Bizler Almanya genelinde 1500'den fazla çalışanı, 150 şubesiyle ve 11 tane dünyanın farklı ülkelerindeki yan kuruluşları ile yüksek kalitede ürün kalitesi ile hizmet vermeye devam etmekteyiz.

SİZİN İÇİN BURADAYIZ...



İstanbul Merkez

Turgut Özal Bulvarı (Eski Millet Cad.)
No. 154 Çapa - Fatih / İstanbul
Tel. +90 212 523 00 74 / 523 02 34
Fax. +90 212 523 02 33

Ankara Bahçelievler Şube

Bahçelievler 2. Cad. (Prof. Dr. Muammer Aksoy
Cad.) Bahar Apt. No. 38/3 Çankaya / Ankara
Tel. +90 312 215 45 00
Fax. +90 312 215 29 31

Ankara Sanatoryum Şube

Pınarbaşı Mah. Sanatoryum Cad.
No. 220/A Keçiören / Ankara
Tel. +90 312 380 56 36
Fax. +90 312 380 29 28

İzmir Şube

Kemeraltı Mah. 1. Beyler, 846. Sok.
Katipzade İş Hanı No. 51/109 Konak / İzmir
Tel. +90 232 484 05 07
Fax. +90 232 484 65 70

Bursa Şube

Demirtaşpaşa Mah. 2. Sabunevi Sok.
No. 46 Osmangazi / Bursa
Tel. +90 224 252 88 99
Fax. +90 224 252 88 99

Adana Şube

Yenişehir Mah. 68018 Sok. Galaksi Apt.
Sitesi B Blok No:3/2 Seyhan / Adana
Tel. +90 322 228 28 25
Fax. +90 322 228 28 25

Eskişehir Şube

Arifiye Mah. Alaaddin Cad. Aktürk Apt.
No:12/D Odunpazarı / Eskişehir
Tel. +90 222 230 33 04
Fax. +90 222 230 33 05

Konya Şube

Ferhuniye Mah. Sultanşah Cad. Fatih Sitesi
A Blok No: 26/B Konya
Tel & Fax : 0332 351 86 52

Kayseri Şube

Hacı Saki Mh. Çimen Sok. No:22/B
Pera Plaza Kocasinan / Kayseri
Tel & Fax : 0352 336 69 21

Kocaeli Şube

SGK İl Müdürlüğü Yanı
Yahya Kaptan Mah. Çam Sakızı Cad.
Koçakelçi İşmerkezi No: 10
İzmit /KOCAELİ

Bizi Takip Edin:



p10060tr1906



medical technology
made in germany

